

SINUS A

Doccia nasale

Flacone 120 ml + 12 bustine saline

SINUS A


Composizione: Sodio Cloride, Sodio Bicarbonato

Caratteristiche: i lavaggi nasali alleviano i sintomi causati dalle allergie, dalla sinusite, dalla secchezza dell'aria, dalla congestione nasale, dal raffreddamento e dalla rinite gravidica. Test clinici dimostrano che sono in grado di ridurre sensibilmente i problemi legati ai condotti nasali e aiutano a ritrovare una corretta respirazione. Nel flacone è presente una soluzione salina per il lavaggio del naso; si tratta di un prodotto completamente naturale e sicuro per gli adulti, per i bambini sotto i 12 anni, per le donne in stato di gravidanza o allattamento e per i pazienti in cura con altri medicinali. È sufficiente diluire una bustina di sali premiscolati in acqua tiepida all'interno del flacone in dotazione, mescolare bene e spremere per pulire i condotti nasali.

Indicazioni: consente di eliminare sintomi quali raffreddore, congestione nasale e secchezza delle narici. Combatte allergie nasali e irritazione nasale dovuta a polvere, fumo, peli di animale, erba, polline e smog.

NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 12 ANNI

Modalità d'uso: introdurre il contenuto di 1 bustina nel flacone (02). Riempire con acqua fino a 120 ml e mescolare bene (03 e 04). Posizionare il beccuccio in ognuna delle due narici (05). Spremere il flacone (06). Ripetere fino a sentire il flusso di soluzione passare attraverso la narice opposta; ripetere nuovamente per decongestionare il naso. Vedere le figure sotto riportate.

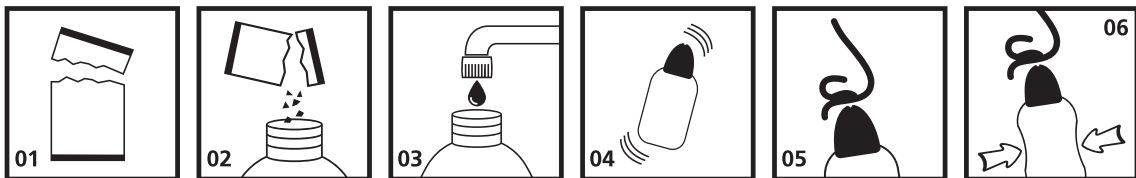

Dosaggio: adulti e bambini sopra i 12 anni. 1-2 bustine ogni minimo due ore per tutta la durata necessaria.

Attenzione: interrompere immediatamente il trattamento e consultare il medico se il lavaggio risulta fastidioso o se i sintomi persistono. Il prodotto è adatto all'utilizzo esclusivo da parte di una persona. Lavare con acqua e sapone dopo ogni utilizzo.

Effetti collaterali: i casi di effetti collaterali riportati in seguito ad un utilizzo corretto del prodotto sono minimi e considerati minori. Si tratta perlopiù di prurito e di una leggera sensazione di pizzicore nel naso. Interrompere il trattamento e consultare il medico se si riscontra una reazione allergica dovuta all'utilizzo del prodotto.

La doccia nasale Sinus è sicura anche in caso di gravidanza e allattamento.

Conservazione: tenere lontano le bustine dal calore eccessivo e dall'umidità, preferibilmente tra i 5 e i 30°C. Utilizzare entro 12 mesi dall'apertura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Confezione: Flacone 120 ml + 12 bustine saline (3g).

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Contattare il medico se l'irritazione persiste.




REF T1015.428.0001 (GIMA 28084)



Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. Muhsin
Yazicioğlu Cad. No: 45/5 - 34522 Esenyurt / İstanbul / TURKEY



Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

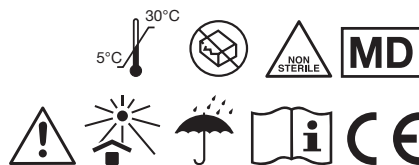

















SINUS **A**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote		IT Limite di temperatura GB Temperature limit FR Limite de température ES Límite de temperatura
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES No usar si el paquete está dañado
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable
	IT Data di scadenza GB Expiration date FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad		IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		IT Distribuito da GB Distributed by FR Distribué par ES Distribuido por