

DRUG READER - TEST URINE A BICCHIERINO

- 24561 DRUG READER A BICCHIERINO con software e stampante
- 24562 TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 7 droghe
- 24563 TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 8 droghe

Il lettore professionale GIMA di test droghe esamina digitalmente i bicchierini di urina DOA e fornisce un'analisi completa sullo schermo touch.

- riconoscimento automatico del menu dei test (codice a barre 2D)
- controllo di qualità del sistema nel corso della procedura
- scheda di memoria per archiviare i dati del test
- gestione dei dati/esportazione dei risultati archiviati

Vantaggi principali:

- automazione: nessuna variabilità/soggettività nell'interpretazione dei risultati
- accuratezza: prestazioni migliori rispetto all'interpretazione visiva
- facilità d'impiego: risultati rapidi e stampa automatica
- portabilità
- connessione LIS

Stampante integrata e software in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR. Fornito con rotolo di carta per stampa, cavo di alimentazione e adattatore, adattatore UE, bicchierino di calibrazione, penna tattile e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR.

- 35674 CARTA TERMICA - 57 mm x 25 m - ricambio

24562



Porta USB
e LAN



Penna tattile inclusa



24561

Schermo
touch

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo:	conversione fotoelettrica
Schermo:	LCD touch 7"
Tempo di lettura:	1 - 2,5 minuti
Tipo di rilevazione:	qualitativa
Sorgente di luce:	LED
Connessione:	porta LAN, 4 porte USB
Stampante:	termica integrata
Alimentazione:	CC 12V, 2A
Altitudine operativa:	0-2000 m
Dimensioni:	221x215xh 165 mm
Peso:	< 1,5 kg

DROGA	24562	24563	CUT OFF NG/ML	Tempo rilevazione
MTD	•	•	300	5-7 giorni
MDMA	•	•	500	5-7 giorni
MET	•	•	500	3-5 giorni
COC	•	•	300	2-5 giorni
THC	•	•	50	-
AMP	•	•	500	2-5 giorni
MOP	•	•	300	5-7 giorni
BUP	•	•	10	5-7 giorni
S.V.T.				
OX	•	•		
S.G.	•	•		
PH	•	•		
NiT	•	•		
Glut	•	•		
CRE	•	•		

TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" - PROFESSIONALE

- 24545 TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" URINE - 7 DROGHE - conf. da 25

Test rapido per la rilevazione qualitativa simultanea di più droghe e metaboliti di droghe nell'urina umana. Rileva le seguenti sostanze: (MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>+<MET500>+<THC>+<MOP>.

- facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni d'urina, basta inserire la chiave per iniziare il test e ottenere i risultati in 5 min
- bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina
- design speciale: il campione non contamina l'urina residua, che può essere spedita ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche
- chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di laboratorio può effettuare il test.

Uso professionale. Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Precisione: i risultati presentano un'accuratezza $\geq 75\%$

per un campione con cut-off $\pm 25\%$ e un'accuratezza pari al 100% nei valori negativi.

TEST MULTIDROGA A BICCHIERINO - 24545

DROGA	CUT OFF NG/ML	TEMPO RILEVAZIONE*
MOP	300	5-7 giorni
COC	300	2-5 giorni
THC	50	-
AMP	500	2-5 giorni
MDMA	500	5-7 giorni
MTD	300	5-7 giorni
MET	500	3-5 giorni

*L'utilizzo di droghe anteriori al tempo di rilevazione non viene misurato



Il pannello del test è ben fissato al bicchierino, proteggendolo da contaminazione


Durata di conservazione max 22 mesi

MULTITEST 6 DROGHE - 8 PARAMETRI MIDSTREAM SU SALIVA

- 24566 MULTITEST DROGHE MIDSTREAM SU SALIVA - conf. da 20

Un unico dispositivo multiparametro per la rilevazione simultanea di 6 diverse droghe in 10 minuti. Sistema economico ed efficace per verificare il consumo di sostanze illecite da parte dei lavoratori. Per uso professionale. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

24566

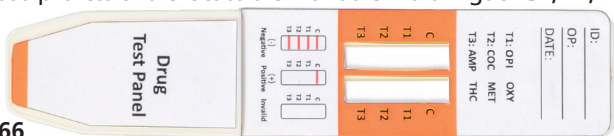

Droga	Parametri	Cut-off (ng/ml)
Oppiacei (OPI/MOP):	Morfina	40
	6-Monoacetilmorfina	4
Cocaina (COC):	Benzoilecgonina	30
Anfetamina (AMP):	d-Anfetamina	40
Ossicodone (OXY):	Ossicodone	40
Metanfetamina (MET):	d-Metanfetamina	40
	3, 4-Metilendiossimetanfetamina (MDMA)	50
Marijuana (THC):	11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH	10

TEST DROGA SU URINE PER USO PROFESSIONALE


- 24540 TEST COCAINA - striscia - urine - cut off: 300 ng/ml
 - 24541 TEST MARIJUANA - striscia - urine - cut off: 50 ng/ml
 - 24542 TEST OPPIACEI - striscia - urine - cut off: 2.000 ng/ml
- Cod. 24540-41-42 venduti in confezioni da 50 bustine sigillate.

CE

CE



24540-41-42

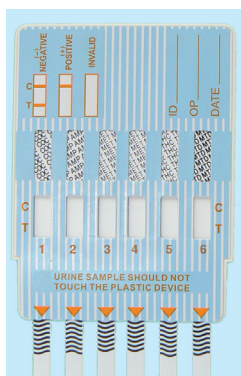

24550

- 24550 TEST MULTIDROGHE 6 parametri - urine - conf. da 25*
 - 24549 TEST MULTIDROGHE 8 parametri - urine - conf. da 25**
 - 24551 TEST MULTIDROGHE 12 parametri - urine - conf. da 25
- Risultati accurati in 5 minuti per le seguenti droghe: anfetamine*, cocaina*, marijuana (cannabis)*, metanfetamine*, oppiacei*, fenciclidina*, barbiturici, benzodiazepine, ecstasy, morfina300, metadone, antidepressivi triciclici.

*Droghe con l'asterisco solo in 24550

**Cod. 24549 droghe con asterisco più MDMA and 6-AM.

Livelli di cut off conformi agli standard SAMHSA. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.

24551



Droga	TEST MULTIDROGA			Tempo rilevazione
	Cut off ng/ml	Cut off ng/ml	Cut off ng/ml	
MOP	-	-	300	5-7 giorni
COC	150	150	150	2-5 giorni
THC	50	50	50	5-8 giorni
AMP	500	500	500	2-5 giorni
MDMA	-	500	500	5-7 giorni
MTD	-	-	300	5-7 giorni
MET	500	500	500	3-5 giorni
BZO	-	-	300	7-10 giorni
BAR	-	-	300	2 giorni - 4 sett.
PCP	25	25	25	-
OPI	2000	2000	2000	5-7 giorni
TCA	-	-	1000	-
6-AM	-	10	-	-