

LETTINI VISITA A 2 SEZIONI - ACCIAIO CROMATO E INOX

- 44461 LETTINO VISITA ACCIAIO CROMATO
- 44463 LETTINO VISITA ACCIAIO INOX

Struttura in acciaio cromato (44461) o acciaio inox (44463) tubolare Ø 25x25 mm. Schienale regolabile mediante cremagliera. Imbottitura e rivestimento in materiale plastico, lavabile e ignifugo Classe 1 IM. Piedini in gomma. Fornito con portarotolo posizionabile sul lato della pediera o sul lato della testata. Dimensioni: 177x60xh 75 cm. Peso: 25 kg. Fornito smontato. Conformità a MDR.




LETTINO VISITA KING AD ALTEZZA REGOLABILE

- 27613 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu - 9 - telaio bianco
- 27612 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - colore a richiesta* - telaio bianco
- 44477 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - blu medio chiaro - telaio nero
- 44480 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - colore a scelta* - telaio nero

*disponibile in 30-40 giorni, sotto tabella dei colori

Letto regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a -10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore bianco RAL 9003 o nero, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM. Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm. Peso: 70 kg. Portata max: 150 kg. Tensione di esercizio: 100-240V, 50/60 Hz. Portarotolo incluso.

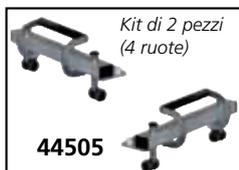

- 44505 KIT ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI - opzionale



LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE

- 44531 LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - blu
- 44535 LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - colore a scelta*

*disponibile in 30-40 giorni, sotto tabella dei colori

Letto molto robusto realizzato in tubolare di alta qualità. I cuscini sono reclinabili mediante una molla a gas attivata da una leva ergonomica situata sotto il telaio superiore. Testata inclinabile fino a +70° e fino a -35°. Le due colonne elettriche consentono di regolare l'altezza e raggiungere molto rapidamente la posizione TR/RTR mediante pedali, pulsanti o due barre perimetrali. Imbottitura in gomma ad alta densità, ignifuga di Classe 1 IM, rivestita con tessuto ignifugo di Classe 1 IM (similpelle). Lavabile e disinfettabile con i comuni detersivi. Dimensioni: 195x68xh 48/89 cm. Peso: 80 kg. Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata max: 200 kg. Dotato di tappo per foro bocca/naso, porta rotolo di carta, 2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili.



- 44505 KIT ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI - opzionale

