


SISTEMI DI PRESSOMASSAGGIO, PRESSOTERAPIA

Il corpo umano ha una circolazione periferica sanguigna e linfatica. La terapia di pressoammassaggio è un sistema automatico di drenaggio e di ausilio alla circolazione che aiuta i pazienti durante la convalescenza, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e il metabolismo. Costituito da camere d'aria e da un compressore ad aria, massaggia le gambe, le braccia o la vita.

- Indicazioni mediche (solo 28441)**
- TVP (Trombosi Venosa Profonda)
 - Edema linfatico
 - Post-paralisi
 - Convulsioni arti
 - Flebosclerosi
 - IVC (Insufficienza Venosa Cronica)
 - Post-mastectomia
 - Post-trauma
 - Lesioni del midollo spinale
 - Vene varicose
 - Sciatica
 - Diabete
 - Distorsioni
 - Insufficienza arteriosa

- Indicazioni per uso domiciliare (solo 28441)**
- Edema linfatico
 - Malattie causate da disturbi della circolazione sanguigna
 - Scioglimento dei grassi
 - Trattamento linfatico donne gravide
 - Piedi o mani intorpiditi
 - Freddo a piedi o mani
 - Cura dello stress, insonnia
 - Traumi da palestra
 - Medicazione domiciliare
 - Corpo sano e pelle elastica
 - Avanzamento età, debolezza, fatica


**MK400L
STIMOLA LA
CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA**

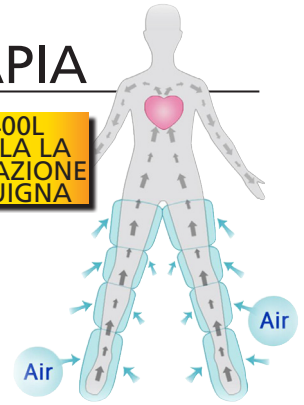

PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE

- **28415 PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE - GAMBALE A**
 - **28416 PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE - GAMBALE B**
- Intensità e durata della pressione regolabili secondo le necessità del paziente. Collaudo pressione nelle singole camere. Portatile, facile da usare, per uso domiciliare. Fornito con 2 gambali A (74x62 cm) o B (79x75 cm) a 4 camere, 1 tubo doppio e 2 guide in plastica per i piedi, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES).

Consumo energetico: 32 W (40 VA) +10%
Tensione: CA 220V - 50-60 Hz

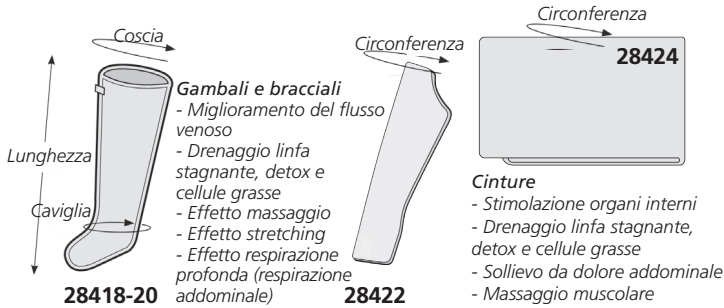

ACCESSORI PER ANYCARE E MAYLEA						
Nuovo*	Vecchio**	GAMBALI	Altezza paziente	Coscia	Caviglia	Lungh.
28418	-	Gambale A	160-170 cm	62 cm	41 cm	74 cm
28419	-	Gambale B	170-180 cm	75 cm	43 cm	79 cm
28420	-	Gambale C	> 180 cm	76 cm	46 cm	94 cm
BRACCIALI - CINTURE				Circonferenza	Lungh.	
28422	28436	Bracciale		50 cm		88 cm
28424	28437	Cintura		122 cm		38 cm
TUBI						
28426	-	Tubo singolo per collegare un manicotto				
28427	28440	Tubo doppio per collegare due manicotti				
28428	-	Tubo di distribuzione per collegare tre manicotti - richiede 28426+28427				

*I manicotti nuovi possono essere usati solo con tubo Anycare standard o con codici 28426-8
**I manicotti vecchi possono essere usati solo con tubo Maylea standard o con codice 28440

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE MK400L

- **28441 SISTEMA PROFESSIONALE DI PRESSOTERAPIA MK400L**
- 2 gambali XL e 2 tubi singoli**
MK400L è un sistema terapeutico professionale di pressoterapia che dispone delle funzioni basilari per aiutare vari tipi di pazienti. Il sistema garantisce 3 modalità di compressione (ondulazione, spremitura, doppia compressione), parametri di compressione inversa, funzioni di selezione per scegliere direttamente le zone da comprimere e un regolatore di velocità. Tastiera touch screen. Manuale: GB, IT, ES.



**SISTEMA
PROFESSIONALE DI
PRESSOTERAPIA**

- **28442 GAMBALE L - 6 CAMERE - opzionale**
- **28443 GAMBALE XL - 6 CAMERE - ricambio**
- **28444 ESTENSIONE GAMBALE XL - 10 cm extra per 28443**
- **28445 TUBO SINGOLO - ricambio**
- **28446 BRACCIALE - 6 CAMERE - universale**
- **28447 GUAINA VITA - 6 CAMERE - circonferenza min-max 94-125 cm**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di pressione: 10~200 mmHg
- Rilevamento automatico di pressione
- Tensione di esercizio: 220-240 V, 50/60 Hz, 50 VA
- Tempo di utilizzo: 1~90 minuti
- Dim. prodotto: 415x310x160 mm
- Peso prodotto: 6,5 kg

Possibilità di utilizzare due accessori contemporaneamente: MK400L è dotato di 2 prese di connessione



Modalità A (Ondulazione)

Le camere d'aria selezionate si gonfiano e sgonfiano una per volta in sequenza dal piede alla coscia.

Modalità B (Spremitura)

Dopo che tutte le camere d'aria selezionate si sono gonfiate in sequenza dal piede alla coscia, si sgonfiano contemporaneamente.

Modalità C (Modalità B due volte + Modalità A inversa 1 volta)

Le camere d'aria selezionate si gonfiano e sgonfiano a due a due in sequenza dal piede alla coscia.
Modalità inversa: consente di invertire automaticamente la modalità selezionata.

Gambale	Misura gamba (cm)						
Misura	A	B	C	D	E	F	G
L	64,0	49,5	40,5	34,5	75,0	38,0	28,0
XL	73,5	55,0	42,0	35,5	85,0	43,0	31,0