


## AEROSOL MESH

### • 28066 AEROSOL MESH

Nebulizzatore compatto, maneggevole e leggero per il trattamento dei disturbi respiratori come infiammazioni acute, tracheiti, bronchiti, gonfiore e bruciore alla gola. Funziona con 2 batterie AA standard o cavo USB.

- ottimizza i benefici del medicinale
  - portatile e maneggevole (è alto solo 117 mm)
  - ultra silenzioso e ultra leggero (pesa solo 104 g)
  - un solo pulsante per un utilizzo semplice
  - per adulti e bambini: la sua silenziosità e il suo design compatto consentono l'inalazione anche durante il sonno dei bambini.
- Dotato di mascherina per adulti e bambini, boccaglio, 2 batterie AA, cavo USB, borsa per trasporto, manuale e scatola multilingue (GB, IT, FR, ES, PT, DE).

- 28067 KIT ACCESSORI (mascherina per adulti e per bambini, boccaglio) - ricambio
- 28068 TESTINA DI RICAMBIO - ricambio

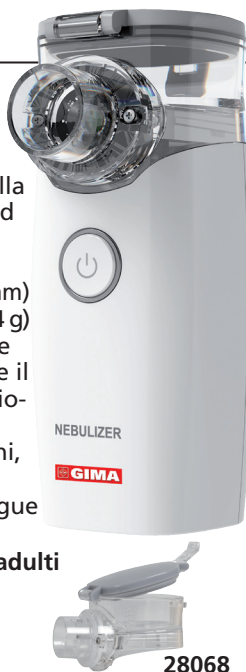

28068

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	2 batterie AA o cavo USB CC 5V
Frequenza ultrasuoni:	circa 110kHz
Tasso di nebulizzazione:	≥0,25ml / min
Volume liquidi max/min:	10ml / 0,5ml
MMAD	circa 4µm
Durata nebulizzatore:	180 ore
Durata batterie:	60 minuti
Spegnimento:	automatico in assenza di liquidi
Livello di sicurezza:	Tipo BF, Classe II, IP 22



## AEROSOL MYNEB

### • 28073 AEROSOL MYNEB - a pistone

Aerosol compatto, rapido e silenzioso. Indicato per il trattamento delle malattie respiratorie, bronchiali, asmatiche e allergiche.

Ideale per nebulizzare qualsiasi medicina, anche quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi con elementi solidi (sospensioni). Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e bambini, tubo d'aria, bocchetta e forcina nasale.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.  
Classe IIa.

- 28093 FILTRO - ricambio - conf. da 3

MADE IN ITALY

COMPATTO  
SILENZIOSO



28073


### CARATTERISTICHE TECNICHE

Adattatore CA:	ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A uscita 12 V - CC 2A
Ciclo operativo:	30/30 min. ON/OFF
Rumorosità:	51 dB
Tasso di nebulizzazione:	0,45 ml/min con NaCl 0,9%
Flusso d'aria:	12 l/min
Pressione massima:	165 kPa/1,65 bar
Dimensione particelle:	75% < 5 µm (NaCl 0,9%)
Dimensioni e peso:	132x140xh 60 mm - 450 g

## ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

### ACCESSORI PER AEROSOL

Gima offre differenti ampole corredate di accessori, compatibili con ogni marca di Aerosol.

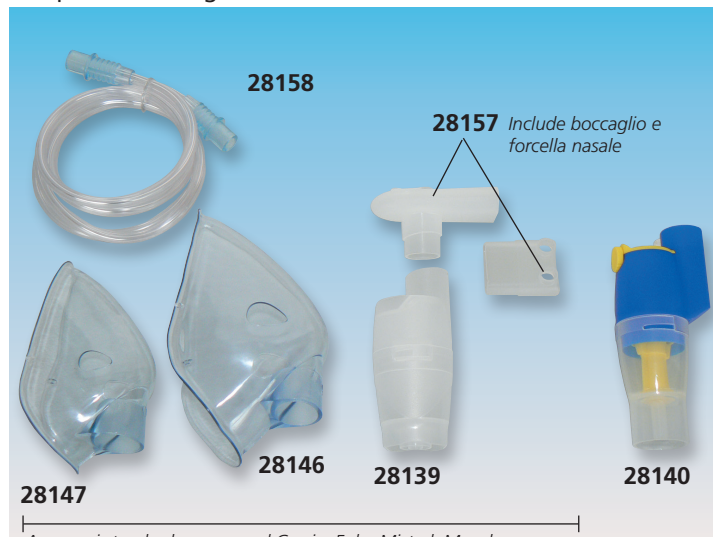

28158

28157 Include boccaglio e forcina nasale

28146

28139

28140

28147

Accessori standard con aerosol Corsia, Eolo, Mistral, Myneb

### AMPOLLA FASTERJET con valvola

Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare qualsiasi tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.




Ampolla fasterjet: per la somministrazione rapida di qualsiasi farmaco

28163 + 28165

### CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET

Capacità: 16 ml	Tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 µm 80%	
Volume residuo: 0,8 ml	
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 µm	

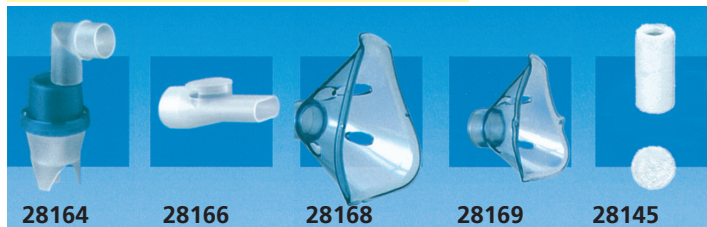

28164

28166

28168

28169

28145

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Compatibile con
Dotazione Standard con Myneb, Corsia, Eolo, Mistral		
28158	Tubo connessione PVC - 1m	tutti gli aerosol
28139	Ampolla aerosol	tutti gli aerosol
28146	Mascherina adulti* - sostituisce 28143	ampolla 28139/28140
28147	Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144	ampolla 28139/28140
28157	Boccaglio - forcina nasale	ampolla 28139/28140
28138	Kit aerosol	tutti gli aerosol
	Mascherina adulti e pediatrica, tubo PVC, ampolla, forcina nasale, boccaglio	
28140	Ampolla aerosol	tutti gli aerosol

\*Con elastico

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Compatibile con
28163	Ampolla Fasterjet* con sistema a valvola	tutti gli aerosol
28164	Ampolla Nebjet** con doppio effetto Venturi	tutti gli aerosol
28165	Boccaglio bi-valvola	ampolla 28163
28166	Boccaglio	ampolla 28164, ampolla 28163
28167	Forcilla nasale	ampolla 28164, 28163
28168	Mascherina adulti***	ampolla 28164, 28163
28169	Mascherina pediatrica***	ampolla 28164, 28163
28145	Filtro - ricambio	28130/1/2/3/4/5

\*Standard con Happyneb II, Hospyneb

\*\*Standard con Happyneb I, III, Betaneb

\*\*\*Senza elastico