

CASCHETTO A LUCE LED GIMA



- 30939 CASCHETTO A LUCE LED GIMA
- 30941 BATTERIA per 30939, 30940 e 30890* - ricambio
- *Il vecchio caschetto led Gima richiede adattatore 30942 - colore azzurro
- 30943 CAVO BATTERIA - CASCHETTO - ricambio
- 30942 ADATTATORE BATTERIA**

Spot regolabile a 420 mm con diaframma iris: 20-80 mm

75.000 LUX a 200 mm
5.000° KELVIN

7 ore continue di operatività con una batteria carica

Intensità luce regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spot regolabile a 420 mm: 20-80 mm
Illuminazione a una distanza operativa di 200 mm: ≥ 75.000 lux
Distanza di fluttuazione: 12,5 mm
Regolazione dell'angolo: $\pm 25^\circ$ in verticale
Peso lampada frontale (esclusa fascia): 69 g
Sorgente di illuminazione: luce molto brillante, 5 W LED, 20.000 ore di funzionamento
Alimentazione: batteria al litio 7,4 V/4.400 mAh
Durata batteria: 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria completamente carica (tempo di ricarica: 5 h)
Tensione: 100-240 VCA, 50-60 Hz Potenza massima assorbita: 30 W
Potenza in uscita dall'adattatore: CC 12 $\pm 0,5$ V, 1,5 A
Standard sicurezza elettrica: EN60601-1, EN60601-2, Classe II tipo BF

Lampada LED senza il calore del tradizionale caschetto a luce alogeno, genera una luce brillante di 5.000 °Kelvin bianca e senza ombre e permette al medico di vedere le caratteristiche del tessuto senza alcuna distorsione. Estremamente flessibile, utilizza una batteria al litio ricaricabile, senza fonte di alimentazione diretta. Lampada frontale comoda e leggera adatta a qualunque tipo di applicazione: chirurgia, ORL, odontoiatria. Utilizzabile durante la ricarica, dotata di indicatore del livello di carica della batteria. Compatibile con gli occhiali binoculari GIMA (30892-8, 30910-5). Design elegante, pratico per diagnosi mobile. Fornita in una valigetta di alluminio con batteria ricaricabile al litio da 7,4 V / 4.400 mAh e caricabatterie. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.



CASCHETTO CHIRURGICO LED

- 30936 CASCHETTO CHIRURGICO LED 40 KL GIMA

Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità. Caratteristiche:

- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili

Fornito con batteria e caricabatteria.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

- 30937 BATTERIA AL LITIO 5W - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fonte di illuminazione: LED 5W
Intensità luminosa: 10 - 40.000 lux
Temperatura di colore: 6.000K
Spot luminoso: Max 70 mm, Min 50 mm a 32 cm
Vita utile lampada: 50.000 ore

Alimentazione: batteria al litio 3,7V
Durata della batteria: 5 - 12 ore
Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
Tensione di ingresso: 100-240VCA
Peso: 200 g



Altezza regolabile della fascia per la testa

Larghezza regolabile della fascia per la testa

Cuscino igienico e confortevole in pelle


30936

Interruttore on/off, controllo della luminosità e LED di stato della batteria sul vano batteria

OCCHIALI BINOCULARI GIMA

OCCHIALI BINOCULARI - LINEA TRADIZIONALE

Occhiali sollevabili leggeri ed ergonomici di tipo galileiano. Utilizzabili da soli o montati sui cod. 30940, 30939. Le lenti in vetro multistrato di qualità superiore garantiscono un'immagine chiara e ben definita. Oculare con ampio campo visivo. Potente messa fuoco per osservare stereoscopicamente gli oggetti. L'angolazione del dispositivo si regola facilmente da 0° a 40° per ridurre l'affaticamento anche in caso di uso prolungato. Spostamento verso l'alto e il basso pari a 6 mm. Distanza pupillare regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di viso.

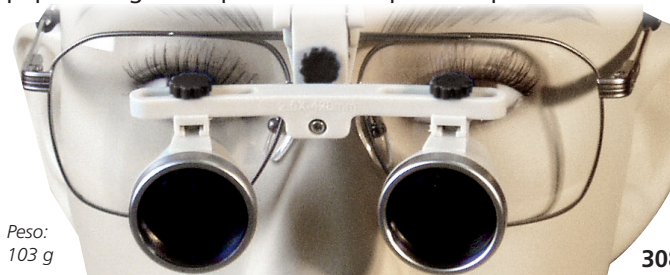

Peso: 103 g

30898

OCCHIALI BINOCULARI - LINEA STYLE

Linea di occhiali binoculari con le stesse caratteristiche della linea tradizionale ma con una montatura extra leggera e accattivante.



Tutti gli occhiali binoculari hanno un manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

Tutti gli occhiali binoculari sono forniti in un cofanetto

30910

Peso: 111 g

Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Campo visivo Ø
30892	Occhiali binoculari	2,5X	340 mm	80 mm
30894	Occhiali binoculari	2,5X	420 mm	90 mm
30897	Occhiali binoculari	3,5X	340 mm	50 mm
30898	Occhiali binoculari	3,5X	420 mm	60 mm

Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI STYLE	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Campo visivo Ø
30910	Occhiali binoculari Style	2,5X	340 mm	80 mm
30911	Occhiali binoculari Style	2,5X	420 mm	90 mm
30914	Occhiali binoculari Style	3,5X	340 mm	50 mm
30915	Occhiali binoculari Style	3,5X	420 mm	60 mm