


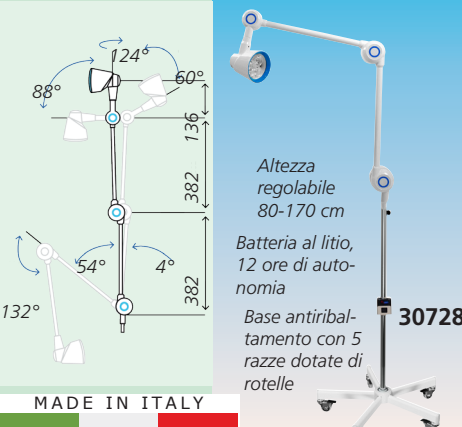
LAMPADINE ALOGENE E LED PER ESAMI E PICCOLA CHIRURGIA

60.000 LUX CON 3 LED

RIMSA

30726, 30727, 30728

Impugnatura ergonomica

Altezza regolabile 80-170 cm
Batteria al litio, 12 ore di autonomia
Base antiribaltamento con 5 razze dotate di rotelle

30728



MADE IN ITALY

60.000 LUX CON 3 LED

RIMSA

Pulsante a sfioramento

30723, 30724, 30725

Tubo flessibile

Altezza regolabile 72-147 cm

Carrello antiribaltamento

30723

MADE IN ITALY

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT

**50.000 LUX - ALOGENA
15.000 LUX - LED**

MIMSAL

30754




Altezza 50 cm (braccio) + 95 cm (carrello)

30754

30756

MADE IN SPAIN

ALFA-FIX E ALFA-FLEX


Tre luci a LED con lenti coincidenti e schermo protettivo in policarbonato. Le tre luci indipendenti riducono le ombre e forniscono un'illuminazione cilindrica profonda con irradiazione termica estremamente ridotta. Ciascun LED integra un resistore per garantire la continuità del funzionamento della lampada anche nella rara eventualità di guasto di un LED.

Design

Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Comando a sfioramento

L'intensità luminosa è regolabile con il pulsante a sfioramento: un lieve tocco del comando consente di regolare l'intensità luminosa dal 4% al 100%.

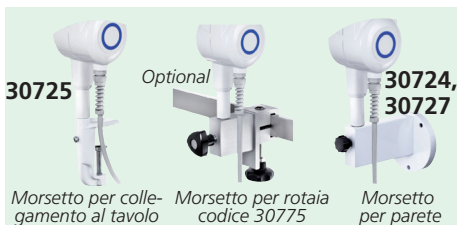

Modello	ALFA-FIX	ALFA-FLEX	LUXIFLEX	LED	LED Plus
Tipo di illuminazione	LED	LED	alogeno	LED	LED Plus
Consumo (Watt)	8	8	35	6,5	10
Durata della lampadina (ore)	> 60.000	> 60.000	5.000	50.000	50.000
Intensità luminosa a 50 cm (lux)	60.000	60.000	50.000	15.000	35.000
Intensità luminosa a 1 m (lux)	20.000	20.000	-	-	-
Temperatura di colore ± 5% a 1 m (K)	4.500	4.500	4.000	4.500	4.500
Indice di resa cromatica (Ra)%	94	94	95	80	97
Campo luminoso a 50 cm (Ø mm)	150	150	-	-	-
Diametro esterno del riflettore (mm)	95	95	80	80	80
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Norme	IEC 60601-1	IEC 60601-1	EN 60601-1-2		
Marchi	UE 2017/745	UE 2017/745	CE 93/42		
Peso (kg)	5	5			
Tensione di esercizio V	100-240	100-240	230	110/230	
Frequenza Hz	50/60		50/60		

Spine intercambiabili

Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).

Braccio flessibile (30723-5)

Il braccio flessibile facilita il posizionamento ed è rivestito da una guaina liscia bianca termoretraibile per migliore pulizia e disinfezione.

Kit batteria

Incluso con 30728, disponibile in 45 giorni per 30723 (acquisto con lampada).

Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT.

Codice GIMA	ALFA-FIX E ALFA-FLEX
30723	Alfa-Flex LED - su carrello
30724	Alfa-Flex LED - a muro
30725	Alfa-Flex LED - da tavolo con morsetto
30726	Alfa-Fix LED - su carrello
30727	Alfa-Fix LED - a muro
30728	Alfa-fix LED - su carrello con batteria

ACCESSORI E RICAMBI	
30766	Lampadina Simplex di ricambio - IRC 35 W per 30760-30763
30768	Carrello di ricambio, base Ø 61 cm per Simplex e Alfaflex
30769	Carrello di ricambio, base Ø 61 cm per Solesud2 e Alfafix
30775	Collegamento rotaia con morsetto
30772	Vetro di ricambio Ø 8,5 cm per 30723-30727
30770	Vetro di ricambio Ø 12,3 cm per Solesud

- **30754 LUXIFLEX su carrello - alogena**
 - **30756 LUXIFLEX su carrello - LED**
 - **30755 LUXIFLEX PLUS su carrello - LED**
- Lampada elegante e versatile per esami e piccola chirurgia in ambulatori, cliniche e ospedali. Adatta anche per esami e interventi veterinari. Classe II. Funzionamento sicuro a bassa tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore elettronico situato nella parte inferiore della lampada. Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle facilitano l'uso e il trasporto.
- **30757 LAMPADINA LUXIFLEX DI RICAMBIO - alogena**

35.000 LUX - LED PLUS

MIMSAL

30755




Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT

30755

30755