

IRRIGATORE ELETTRONICO PORTATILE OTOCLEAR®

• **25855 IRRIGATORE ELETTRONICO PORTATILE OTOCLEAR®**
L'irrigatore elettronico portatile OtoClear® è una soluzione versatile per l'irrigazione auricolare automatizzata. Utilizzato con i puntali brevettati OtoClear®, rimuove in modo sicuro ed efficace il cerume. Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo. L'acqua a tre flussi divergenti pulisce con un movimento circolare la parete del condotto uditivo, allontanandosi dalla membrana timpanica. La rimozione del cerume risulta così sicura, semplice e pratica. Consigliato per strutture con grandi volumi di lavoro.

Caratteristiche:

- flusso regolabile
- irrigazione pulsata efficace
- sistema di controllo elettronico della pressione con tre impostazioni: bassa, media, alta
- serbatoio acqua autonomo 278 ml
- batteria ricaricabile

Fornito con: bacinella di irrigazione orecchie, 5 puntali OtoClear® e adattatore di ricarica 220V.



• **25861 PUNTALI PER IRRIGAZIONE AURICOLARE OTOCLEAR® - monouso - conf. da 40 - ricambio**
I puntali per l'irrigazione auricolare OtoClear® sono puntali morbidi e flessibili, di forma svasata, che dirigono l'acqua seguendo 3 flussi divergenti, migliorando la sicurezza del paziente, evitando il rischio di inserimento eccessivo ed eliminando il cerume senza inconvenienti durante l'irrigazione. Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo. L'acqua viene diretta verso la parete del condotto uditivo, con tre flussi divergenti, invece che direttamente sulla membrana timpanica. Compatibile con vari dispositivi di erogazione.

• **25856 BASTONCINO ADATTATORE - ricambio**

• **25857 SERBATOIO ACQUA 278 ml - ricambio**

• **25862 BACINELLA IRRIGAZIONE ORECCHIE**

- conf. da 3 - ricambio

Serbatoio acqua

25855

MADE IN THE USA



SCHIZZETTONI VETRO-METALLO E TUTTO METALLO



Tecnica brevettata a 3 getti. Compatibile con 25804, 25809, raccordo Luer Lock standard (forma conica)



MADE IN GERMANY


SCHIZZETTONI VETRO-METALLO JANET RECORD
Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completati di 2 cannule, una conica e una olivale. Confezionati in singola scatola di cartone.

| Codice GIMA | SCHIZZETTONI VETRO METALLO COMPLETI DI 2 CANNULE |
|-------------|--|
| 25801 | Janet Record 50 cc - 13 x Ø 3,5 cm |
| 25802 | Janet Record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm |
| 25803 | Janet Record 200 cc |
| 25804 | Cannula di ricambio per Janet Record (forma conica) |
| 25805 | Cannula di ricambio per Janet Record (forma olivale) |
| 25861 | Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40 |

SCHIZZETTONI TUTTO METALLO SCHIMMELBUSCH
Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completati di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone

| Codice GIMA | SCHIZZETTONI TUTTO METALLO COMPLETI DI 3 CANNULE E SCODELLINO ORECCHIALE |
|-------------|--|
| 25806 | Schimmelbusch 50 cc |
| 25807 | Schimmelbusch 100 cc |
| 25808 | Schimmelbusch 200 cc |
| 25809 | Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma conica) |
| 25812 | Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) piccola |
| 25813 | Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) grande |
| 25861 | Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40 |

SCHIZZETTONI IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ

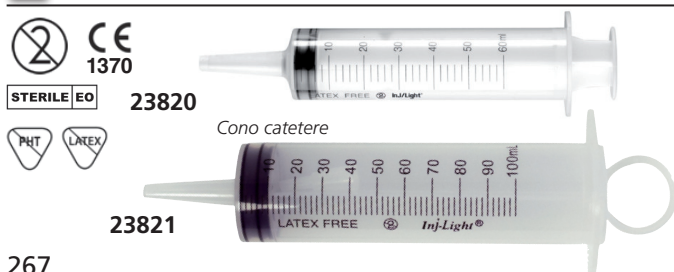

SIRINGHE IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ - sterili
Sterile, monouso, latex-free per orecchie e altri scopi. Scatola in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA. Dispositivo Medico classe IIa.

| Codice GIMA | SIRINGHE IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ STERILI - CONO CATETERE | Minimo vendita |
|-------------|--|----------------|
| 23820 | Siringa 60 ml | conf. da 20 |
| 23821 | Siringa 100 ml | conf. da 25 |