

SET LARINGOSCOPI F.O. LED E XENON/ALOGENI GIMA GREEN



34453

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, PL,
RO, Arabo

SET F.O. XENON/ALOGENI E LED GIMA

- lame Mc Intosh o Miller

- i laringoscopi F.O. offrono una luce fredda brillante
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra ottica Maxlite con fibra integrata
- manico F.O. xenon/alogeno o LED a batteria ricaricabile
- manico a batteria ricaricabile 2,5 o 3,5 V (batteria non inclusa)
- il manico a batteria ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa).
- lame non magnetiche.

SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O.

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V	
34451	Set pediatrico	2 lame Miller 0-1
34454	Set pediatrico	3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4
34453	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34455	Set dottore	3 lame Miller 1-2-3
34485	Lampadina xenon/alogeno 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)	
34450	Scatola vuota senza spugna	
Codice GIMA	SET F.O. LED GIMA GREEN - 2,5 V O 3,5 V	
34327	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34328	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34329	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V

LAME F.O. MAXLITE CON FIBRA INTEGRATA

Fascio di fibre ottiche integrato senza cavità che trattiene la sporcizia o i fluidi corporei, consente alla lama di essere facilmente pulita e decontaminata.



LAME F.O. GIMA GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME E LAMPADINE

	Lama F.O. Gima Green	Lama F.O. Mc Intosh Maxlite
Conduttore fibra:	smontabile	integrato
Ø fascio F.O.:	4,0 mm	4,5 mm
Singole micro-fibre:	> 5.500	> 6.500
Trasmissione di luce 2,5 V (Xenon):	7.000 lux	8.000 lux
Trasmissione di luce 2,5 V (LED):	18.000 lux	20.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (Xenon):	12.500 lux	14.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (LED):	30.000 lux	40.000 lux
Autoclavabile a 134 °C:	2.000 volte	2.000 volte
Durata lampadina LED:	50.000 ore	50.000 ore

SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O. - FIBRA INTEGRATA

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO MAXLITE - 2,5 V	
34332	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1
34333	Set adulti	3 lame Mc Intosh 1-2-3
34334	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34485	Lampadina xenon/alogeno 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)	
Codice GIMA	SET F.O. LED MAXLITE - 2,5 V O 3,5 V	
34336	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1 - 2,5 V
34335	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34337	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
Codice GIMA	BATTERIE per GIMA GREEN e MAXLITE	
34466	Batteria Li-ion pediatrica ricaricabile 2,5 V	1.000 mAh
34467	Batteria Li-ion adulti ricaricabile 2,5 V	2.200 mAh
31541	Batteria Li-ion adulti ricaricabile 3,5 V*	

*Batteria fornita a mezza carica

SET F.O. XENON/ALOGENI O LED MAXLITE FLEXTIP E RELATIVE LAME


SET LARINGOSCOPI F.O. XENON-ALOGENI O LED FLEXTIP PER INTUBAZIONI DIFFICILI

Kit eleganti che includono un manico F.O. ricaricabile, una o due lame F.O. Mc Intosh N° 3 o N° 3 e 4 e una lampadina. La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una perfetta visibilità del processo di intubazione anche in condizioni anatomiche difficili. Una migliore visibilità e una leva inferiore che richiede meno forza riducono il rischio di lesioni alla laringe e ai denti.

- struttura in acciaio inox, finitura opaca
- utilizzabili con tutti i manici conformi alla specifica Green
- conformi a norma ISO 7376
- il canale offre una migliore visuale dell'intubazione
- fascio di fibre 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione di luce, 8.000 LUX con lampadine Xenon 2,5V, 20.000 LUX con lampadina LED 2,5V
- 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (non incluse)
- autoclavabili a 134 °C circa 2000 volte e sterilizzabili al plasma (Sterrad 100 NX)



58072

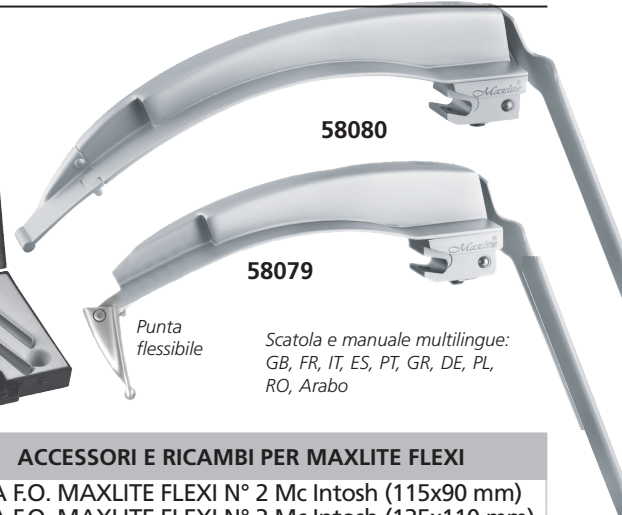

58080

58079

Punta flessibile

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, PL,
RO, Arabo

Codice GIMA	SET F.O. MAXLITE FLEXTIP - 2,5 V con fibre integrate	
58070	SET F.O. XENON MAXLITE FLEXI 1	lama Mc Intosh 3
58072	SET F.O. XENON MAXLITE FLEXI 2	lame Mc Intosh 3-4
58073	SET F.O. LED MAXLITE FLEXI 1	lama Mc Intosh 3
34498	SET F.O. LED MAXLITE FLEXI 2	lame Mc Intosh 3-4

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER MAXLITE FLEXI	
58078	LAMA F.O. MAXLITE FLEXI N° 2	Mc Intosh (115x90 mm)
58079	LAMA F.O. MAXLITE FLEXI N° 3	Mc Intosh (135x110 mm)
58080	LAMA F.O. MAXLITE FLEXI N° 4	Mc Intosh (155x130 mm)
34485	Lampadina 2,5 V - ricambio	
34467	Batteria Li-ion adulti ricaricabile 2,5 V	
31542	Base di ricarica 100-240 V - vedere pagina 377	