

## ■ ROTOLI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

**ROTOI PIATTI** per la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene  
Pellicola trasparente in poliestere/polipropilene e carta  
medicale che consente la penetrazione del vapore e del gas in  
fase di sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano  
colore quando esposti alla sterilizzazione.



**ROTOI A SOFFIETTO** per la sterilizzazione a vapore o ad ETO  
Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medicale  
bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi.



### ROTOI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 200 m

Codice GIMA		Esterno m x mm	Interno m x mm	Minimo vendita
35803	Rotoli piatti	200x50	200x36	conf. da 8
35804	Rotoli piatti	200x75	200x53	conf. da 8
35805	Rotoli piatti	200x100	200x78	conf. da 4
35806	Rotoli piatti	200x150	200x128	conf. da 4
35807	Rotoli piatti	200x200	200x178	conf. da 2
35808	Rotoli piatti	200x250	200x228	conf. da 2
35809	Rotoli piatti	200x300	200x278	conf. da 2
35816	Rotoli piatti	200x400	200x378	conf. da 1

### ROTOI A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 100 m

Codice GIMA		Esterno m x mm x mm	Interno m x mm x mm	Minimo vendita
35825	Rotoli a soffietto	100x100x25	100x78x25	conf. da 4
35826	Rotoli a soffietto	100x150x25	100x128x25	conf. da 4
35827	Rotoli a soffietto	100x200x30	100x178x30	conf. da 2
35828	Rotoli a soffietto	100x250x32,5	100x228x32,5	conf. da 2
35829	Rotoli a soffietto	100x300x40	100x278x40	conf. da 2
35830	Rotoli a soffietto	100x400x40	100x378x40	conf. da 1

## ■ BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

### BUSTE PIATTE E AUTOSALDANTI

per la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene

Pellicola verde chiaro trasparente in poliestere/polipropilene e  
carta medicale che consente la penetrazione del vapore e del  
gas in fase di sterilizzazione.


**Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti  
alla sterilizzazione.**

1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione.
2. La pellicola laminata trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204. La carta medicale è conforme a: DIN 58953

(tedesco), Pharmacopoeia 589 (francese), pr EN 868-3 (euro-  
peo) e BS 6256 (inglese).

3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura.
4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e copolimero di polipropilene) e carta bianca medicale Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.
5. Le linee di termosaldatura (Multiline) sono molto resistenti e distanziate uniformemente; la saldatura esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta.


Rotoli e buste sono certificati e costruiti secondo gli standard  
DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485.

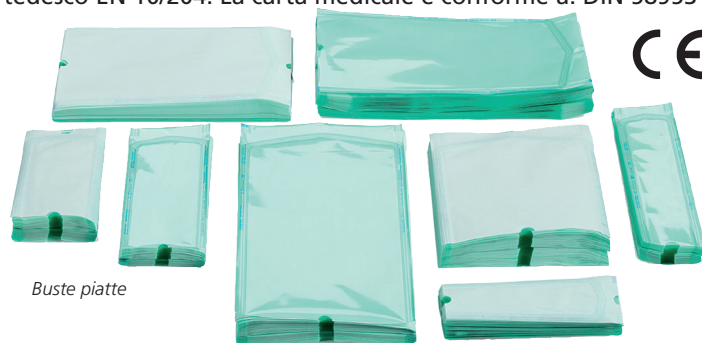

Buste piatte

MADE IN ITALY

DISPONIBILI ALTRI FORMATI  
minimo 10.000 buste

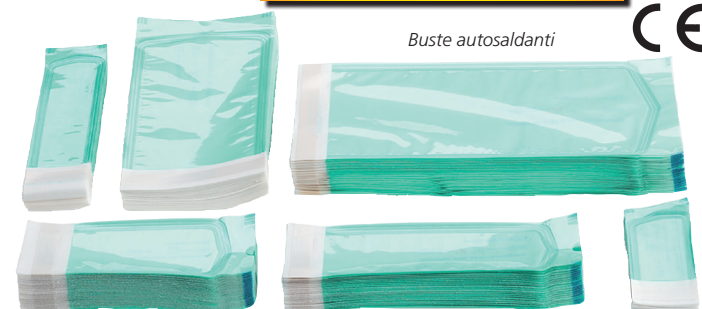

Buste autosaldanti

### BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

Codice GIMA		Esterno mm	Interno mm	Minimo vendita
35880	Buste piatte	100x300	78x285	1.000
35881	Buste piatte	150x200	128x185	1.000
35882	Buste piatte	150x250	128x235	1.000
35883	Buste piatte	150x300	128x285	1.000
35884	Buste piatte	150x400	128x385	1.000
35885	Buste piatte	200x300	178x285	1.000
35886	Buste piatte	200x350	178x335	500
35887	Buste piatte	200x400	178x385	500
35888	Buste piatte	250x400	228x385	500
35889	Buste piatte	250x500	228x485	500
35890	Buste piatte	300x400	278x385	500
35891	Buste piatte	400x600	378x585	500
35895	Buste formato speciale			10.000

### BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

Codice GIMA		Esterno mm	Interno mm	Minimo vendita
35857	Buste autosaldanti	90x165	68x150	2.400*
35858	Buste autosaldanti	90x230	68x215	2.400*
35859	Buste autosaldanti	140x250	118x235	1.600*
35863	Buste autosaldanti	190x330	168x315	1.200*
35864	Buste autosaldanti	190x400	168x385	1.200*
35866	Buste autosaldanti	300x450	278x435	400*

\*Le buste autosaldanti sono confezionate in scatola da 200 buste all'interno di scatolone