

SEDIE PORTANTINE PER SCALE E SEDIE DI EVACUAZIONE

• 34068 SEDIA PORTANTINA PER SCALE - 131x50x155 cm

• 34069 SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER SCALE - 123x50x160 cm

Affidabili e sicure, con forma ergonomica e struttura in lega di alluminio, facili da utilizzare. Servono a casa per gli anziani, a scuola, negli ospedali, negli alberghi, ecc. per le evacuazioni di emergenza. Entrambe salgono e scendono le scale agevolmente e stabilmente grazie ai cingoli in gomma. Sul terreno si spostano come carrozine manuali. Il cingolo a forte aderenza evita che la sedia scivoli o si ribalti quando si ferma sulle scale. Pieghevoli, facili da trasportare e riporre.




Portata max: 100 kg. 4 ruote in gomma resistenti all'usura, maniglie pieghevoli, maniglia telescopica, cuscino removibile, materasso in spugna di PU e cinture di sicurezza.

Schienale di altezza regolabile (solo 34068). Il modello elettrico (solo 34069) ha un sistema di controllo elettrico con:

- circuito interno al telaio, impermeabile e silenzioso
- display LCD con luce LED notturna
- conformità agli standard di sicurezza UE



PALLONI RIANIMATORI

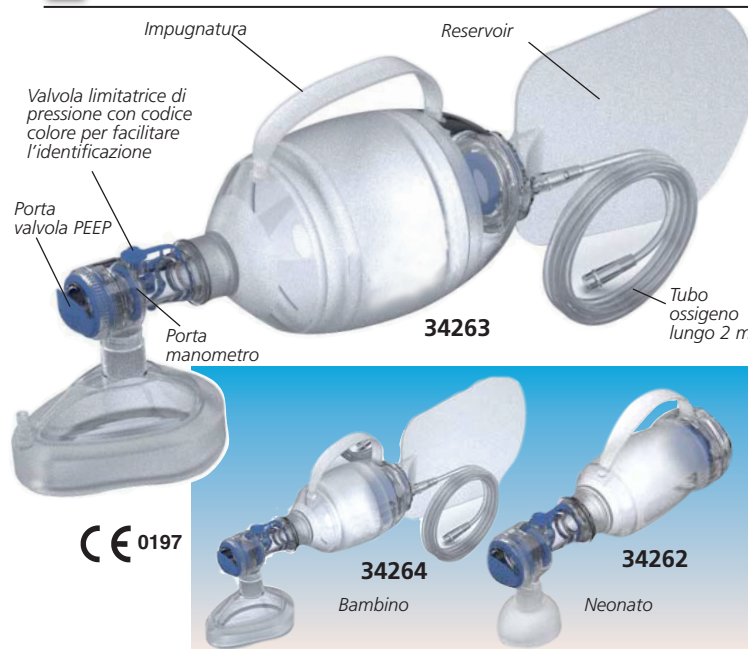

PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - CON IMPUGNATURA
Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR. Vedere accessori a pagina 370.

Codice GIMA	PALLONI RIANIMATORI			KIT PALLONI RIANIMATORI	
	34260	34261	34262	34263	34264
Tipo	Adulto	Bambino	Neonato	Adulto	Bambino
Maschera	N. 5	N. 3	N. 1	N. 5	N. 3
Valvola limitatrice di pressione H ₂ O	60 cm	40 cm	40 cm	60 cm	40 cm
Volume ml	1.600	550	300	1.600	550
Reservoir ml	-	-	-	2.500	2.500
Tubo ossigeno 2 m	-	-	-	sì	sì
Valvola reservoir	-	-	-	sì	sì

SEDIA PORTANTINA VALUE

• 34073 SEDIA PORTANTINA VALUE - 4 ruote

Utilizzata principalmente per trasferire i pazienti su e giù per le scale o altre aree ristrette. Struttura realizzata in alluminio ad alta resistenza con piano di tessuto in pelle sfoderabile tramite cerniera sul retro. Dotata di 4 ruote, quattro maniglie pieghevoli sul retro e cinghie per la sicurezza dei pazienti durante il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	159 kg
Peso:	8 kg
Misura:	schienale 91x50 cm seduta 49x50 cm
Misura da piegata:	92x52x16 cm



DERMATOSCOPIO LED 10X

Fornito in astuccio rigido con piastra di contatto e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT



• 31186 DERMATOSCOPIO LED PORTATILE GIMA 10X

Dermatoscopio LED tascabile, moderno, compatto e leggero, con ingrandimento 10X per la valutazione delle lesioni cutanee. Il sistema ottico di precisione 10X con lenti acromatiche fornisce immagini nitide prive di distorsioni. La piastra graduata di contatto con la pelle, per misurare le lesioni cutanee pigmentate, offre diagnosi accurate. Gamma focale: ± 5D. Lunghezza focale: 25 mm. Alimentata con due batterie alcaline AA 1,5V o con batteria ricaricabile (entrambe non incluse)

• 31586 STAZIONE RICARICA

• 31587 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5 V